

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ / ИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КОЖИ AURORA-CEUTICAL G7+

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ



Уровень громкости голосового помощника (на японском)
Таймер в секундах

SONIC (ультразвуковой режим)

MC – (ионная терапия)

MC + (ионное очищение)

LAMP (инфракрасный режим)

заряд батареи

3 уровня громкости голосового помощника

Переключатель режима SONIC
одно нажатие: включение режима
повторное нажатие: выключение режима


Переключатель режима MC – / +
одно нажатие: включение режима ионного ухода (–)
второе нажатие: включение режима ионного очищения (+)
третье нажатие: выключение режима

Инфракрасный режим
одно нажатие: включение режима
повторное нажатие: выключение режима

www.japan.com.ua

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

РЕЖИМ: MC +

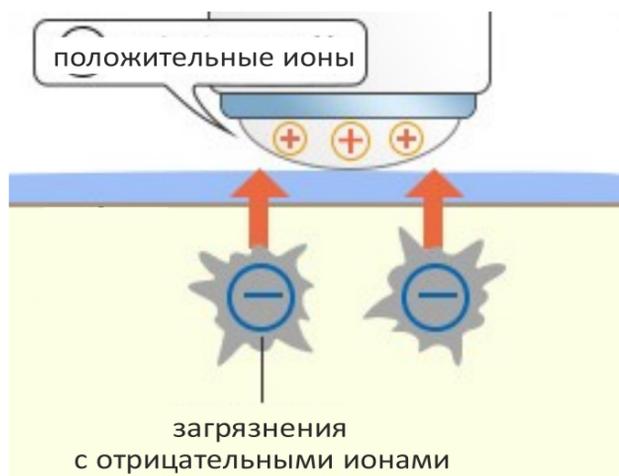

В положительном ионном режиме MC + происходит глубокое очищение пор, в том числе от микро-частиц тональных средств, старого рогового слоя.

УЛУЧШЕНИЕ КРОВОТОКА

РЕЖИМ: LAMP



Инфракрасный режим оказывает согревающий эффект, улучшая кровообращение и лимфоток. Благодаря чему улучшается проникновение ухода и обновление кожи.

ИОННЫЙ ТРИТМЕНТ


РЕЖИМ: MC –



Режим отрицательного ионного лечения позволяет проникать ионам глубоко в роговой слой и доставлять активные компоненты (например, производную витамина С).

УЛЬТРАЗВУК

РЕЖИМ: SONIC

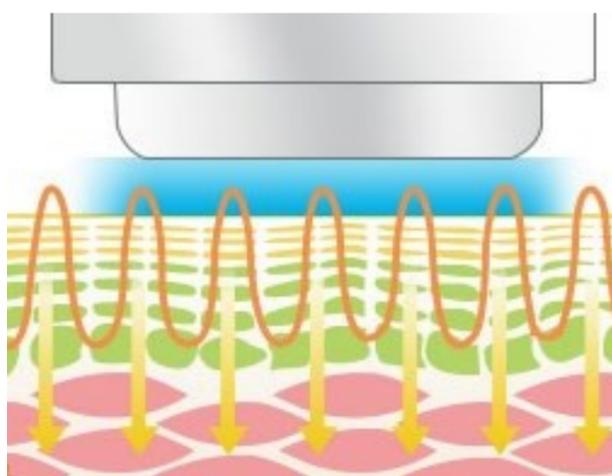

Режим ультразвука осуществляет тонкую вибрацию кожи и оказывает лифтинг-эффект. Частота мягких волн – 7,5 млн. колебаний в секунду – повторяют эффекта салонного массажа.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ / ИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КОЖИ AURORA-CEUTICAL G7+

ОЧИЩЕНИЕ ПОР

ПОТРЕБУЕТСЯ: Отбеливающий лечебный лосьон MILKY LOTION (базовая серия)



Очистите лицо.



Поместите на головку хлопковый диск и закрепите кольцом.



Сверху поместите уходовое средство.



Нажмите 2 раза на кнопку MC – / +, чтобы включить режим ионного очищения.



Каждые 15 секунд будет звучать сигнал, услышав который меняйте положение головки на коже.

www.japan.com.ua

Частота процедур: ежедневно исходя из состояния кожи после умывания до ухода.

ПРОТИВ ПИГМЕНТАЦИИ

ПОТРЕБУЕТСЯ: Лечебный отбеливающий серум CPLA WHITENING



Очистите лицо.



Поместите на головку хлопковый диск и закрепите кольцом.



Сверху поместите уходовое средство.



Нажмите 1 раз на кнопку MC – / +, чтобы включить режим ионного лечения.



Каждые 15 секунд будет звучать сигнал, услышав который меняйте положение головки на коже.

Частота процедур: ежедневно исходя из состояния кожи после умывания до ухода.

ДЛЯ ЛИФТИНГА

ПОТРЕБУЕТСЯ: Аура-лифтинговый гель для ионного лечения AURORA-LIFTUP GEL



Очистите лицо.



Поместите непосредственно на головку гель.



Нажмите 1 раз на кнопку SONIC, чтобы включиться ультразвуковой режим.



Плавными круговыми движениями водите по коже.

Частота процедур: 1-2 раза в неделю после умывания до ухода.